


10% Formal Saline



**BAF-0110-01A, BAF-0110-25A, BAF-2100-70A,
BAF-5100-08A, BAF-6100-08A, BAF-9100-08A**



Contains | Enthält | Contient | Bevat:
Formaldehyde | Formaldehyd | Formaldéhyde
& Methanol | Méthanol

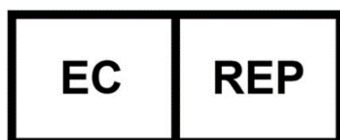

EMERGO EUROPE
Westervoortsedijk 60,
6827 AT Arnhem
The Netherlands

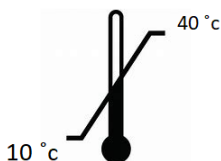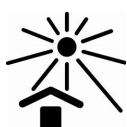

Issue Date: MAY 2023 01.551.576 V4



CellPath Ltd

80 Mochdre Enterprise Park,
Newtown, Powys, SY16 4LE, UK

T: +44 (0)1686 611333

E: sales@cellpath.com

cellpath.com



10% Formal Saline

**BAF-0110-01A, BAF-0110-25A, BAF-2100-70A,
BAF-5100-08A, BAF-6100-08A, BAF-9100-08A**

General tissue specimen container IVD, formal saline.

Ready to use solution.

For Laboratory use.

Keep in a cool, dry, well-ventilated area. Keep containers tightly closed. Store in correctly labelled containers.

Please see expiry on product label.

Components: Formaldehyde 5 - < 10%, Methanol 1 - < 5%

Instructions for Use

NOTE: Immerse specimen in solution as quickly as possible, delayed fixation will affect the quality of the final prepared slide for diagnosis. Recommended Volume of fixative should be 10 – 20 times the volume of the specimen, and specimens should be completely immersed. Leave sample immersed to fix and store at room temperature.

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or the patient is established.

10% Formal Saline

**BAF-0110-01A, BAF-0110-25A, BAF-2100-70A,
BAF-5100-08A, BAF-6100-08A, BAF-9100-08A**

Allgemeiner IVD-Gewebeprobenbehälter, herkömmliche Kochsalzlösung.

Gebrauchsfertige Lösung.

Für den Laboreinsatz.

An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Den Behälter stets fest verschlossen halten. In korrekt gekennzeichneten Behältern aufbewahren.

Bitte beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett des Produkts.

Komponenten: Formaldehyde 5 - < 10%, Methanol 1 - < 5%

Gebrauchsanweisung

HINWEIS: Tauchen Sie die Probe so schnell wie möglich in die Lösung. Eine verzögerte Fixierung beeinträchtigt die Qualität des endgültig vorbereiteten Objektträgers für die Diagnose. Das empfohlene Volumen des Fixiermittels sollte das 10- bis 20-fache des Volumens der Probe betragen, und die Proben sollten vollständig eingetaucht sein. Lassen Sie die Probe eingetaucht, um sie zu fixieren und bei Raumtemperatur zu lagern.

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient ansässig ist, gemeldet werden.

10% Formal Saline

**BAF-0110-01A, BAF-0110-25A, BAF-2100-70A,
BAF-5100-08A, BAF-6100-08A, BAF-9100-08A**

Récipient pour échantillon de tissu général IVD, solution saline formelle.

Solution prête à l'emploi.

Pour une utilisation en laboratoire.

Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver le récipient hermétiquement fermé. Conserver dans des conteneurs correctement étiquetés.

Veuillez consulter la date de péremption sur l'étiquette du produit.

Composants: Formaldehyde 5 - < 10%, Methanol 1 - < 5%

Instructions d'utilisation

REMARQUE: Immergez l'échantillon dans la solution aussi rapidement que possible. Une fixation retardée affectera la qualité de la lame finale préparée pour le diagnostic. Le volume de fixateur recommandé doit être de 10 à 20 fois le volume de l'échantillon et les échantillons doivent être complètement immergés. Laissez l'échantillon immergé pour le fixer et conservez-le à température ambiante.

Tout incident grave survenu lié au dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

10% Formal Saline

**BAF-0110-01A, BAF-0110-25A, BAF-2100-70A,
BAF-5100-08A, BAF-6100-08A, BAF-9100-08A**

Container voor algemeen weefselmonster IVD, gebufferde formaline of fysiologische zoutoplossing.

Voor laboratoriumgebruik.

Bewaar het product in een koele, droge en goed geventileerde ruimte. Houd de containers goed gesloten. Bewaar in correct geëtiketteerde containers.

Zie de vervaldatum op het etiket van het product.

Kant-en-klare oplossing.

Onderdelen: Formaldehyde 5 - < 10%, Methanol 1 - < 5%

Gebruiksaanwijzing

OPMERKING: Dompel het monster zo snel mogelijk onder in oplossing, vertraagde fixatie heeft invloed op de kwaliteit van het uiteindelijk voorbereide objectglaasje voor diagnose. Het aanbevolen volume fixeermiddel moet 10-20 keer het volume van het monster zijn en de monsters moeten volledig worden ondergedompeld. Laat het monster ondergedompeld om te fixeren en bewaar het bij kamertemperatuur.

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.